

Humidificación mejorada, aliento suave

G2S A20 es un dispositivo de presión de ajuste automático con humidificador integrado y conectividad inalámbrica.

family cares




Auto CPAP System
G2S A20




Diseño ultramoderno con una interfaz fácil de usar

- El tanque de agua con estructura de cajón y la tapa de apertura, es más conveniente para llenar agua y limpiar.
- Función de Auto on/off

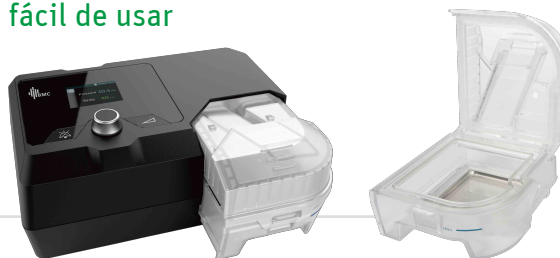


Funciones de comodidad inteligentes

- El humidificador integrado de nuevo diseño tiene una gran placa calefactora (> 50 cm²), lo que garantiza una excelente capacidad de humidificación y mejora el confort.
- Reslex, función de liberación de la presión de exhalación le permite quedarse dormido con una presión más baja fácilmente.

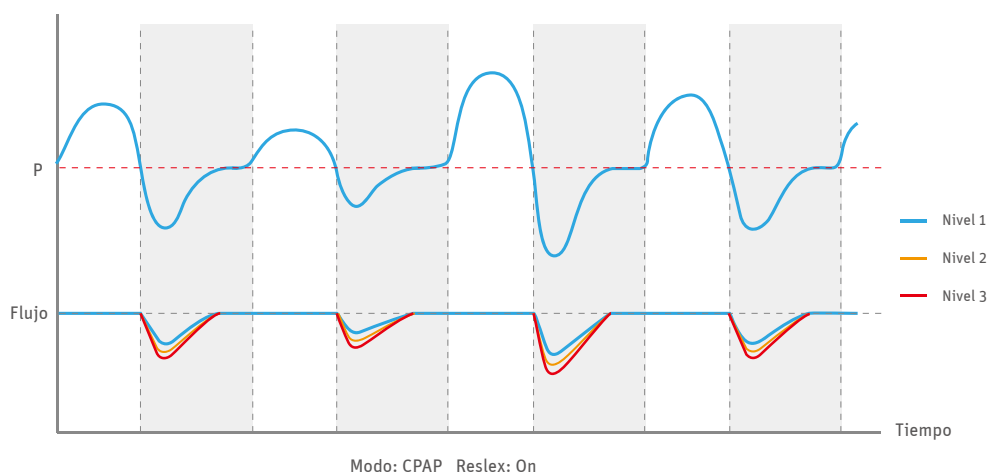

Eficiencias en terapia

- Presión Auto CPAP automáticamente mejorará la comodidad del paciente por la función de monitorización de los episodios de apnea y ronquidos.

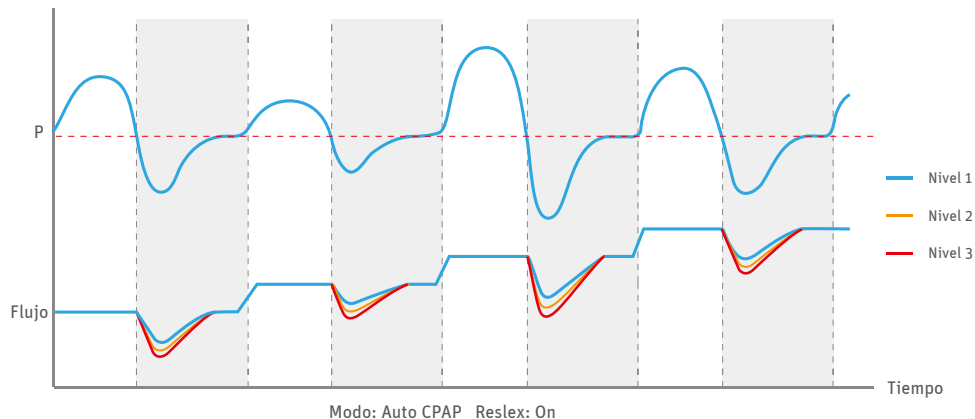

- Una frecuencia respiratoria respalda fija se puede establecer en modo S, en caso de que la frecuencia respiratoria propia del paciente caiga a continuación que el valor seguro.
- La compensación automática de fugas garantiza la precisión de la terapia en cualquier lugar



Solución poderosa de transferencia / recuperación de datos



Tarjeta de SD



Celular



iCode / iCode QR /
iCode QR+

Varias formas para revisar el informe de la terapia

- Informe rápido a través de la pantalla del dispositivo
- BMCares App
- BMCares Plataforma de la nube
- Web de iCode (www.bmc-icode.com)
- BMC nPAP Data Analysis Software (software para PC)
- Web de PC Software (www.icodeconnect.com/quick/info)

Accesorios opcionales completos

G2S adopta una serie de accesorios completos para satisfacer diferentes escenarios de uso y necesidades:



Módulo de Celular



Adaptador de corriente



Tubo Calefactado



Especificaciones

Tamaño del dispositivo

Dimensiones: 274 mm × 184 mm × 115 mm

Peso: 1.9 kg

Capacidad de agua: hasta la línea de llenado máxima 360 mL

Humidificador calentado

Configuración del humidificador: Off, 1 a 5 (95°F a 154.4°F / 35°C a 68°C)

Salida del humidificador: No menos de 10 mg H₂O/L

Modo de trabajo

Auto CPAP, CPAP

Tarjeta SD

La tarjeta SD puede registrar datos del paciente e información de fallas.

Consumo de energía CA

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2.0 A

Nivel de presión de sonido

<28 dB, cuando el dispositivo está funcionando a la presión de 10 hPa

Flujo máximo

Presiones de prueba (hPa)	4	10	15	20
Presión medida en el puerto de conexión del paciente (hPa)	3	9	14	19
Flujo promedio en el puerto de conexión del paciente (L / min)	85	135	140	140

Compensación automática de fugas

Temperatura máxima del gas suministrado: ≤ 43°C

Presión

4 a 20 hPa

Estabilidad de presión estática:

± 0.5 hPa

Frecuencia del pulso

40 a 240 BPM

BMC Medical Co., Ltd.

Room 110, Tower A Fengyu Building, No.115 Fucheng Road, Haidian,
100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86-10-5166 3880 / Fax: +86-10-5166 3880 ext. 810

es.bmc-medical.com