



eFlow<sup>®</sup> rapid  
nebuliser system

Nuevo eFlow<sup>®</sup> rapid  
con eBase Controller

¡Ahora con  
pantalla!

[www.eFlowrapid.info](http://www.eFlowrapid.info)

PARI Pharma  
Advancing Aerosol Therapies



# Nuevo eFlow<sup>®</sup>rapid con eBase Controller



Compatible con:



**Nebulizador eFlow<sup>®</sup>rapid,  
p. ej. con:**

- Colistimetato de sodio
- Tobramicina
- Alfa dornasa
- Solución salina hipertónica (MucoClear<sup>®</sup> 3% y MucoClear<sup>®</sup> 6%)

Compatible con:



**Nebulizadores específicos  
para determinados fármacos:**

- P. ej. Altera<sup>®</sup> para Cayston<sup>®</sup> (aztreonam lisina)
- Otros nebulizadores específicos para determinados fármacos utilizados en distintos estudios clínicos


## Información en pantalla

El nuevo eFlow<sup>®</sup>rapid con eBase Controller mejora ampliamente sus prestaciones:




### Nivel de carga de la batería 50%

-> Tenga pilas nuevas a mano o conecte el dispositivo con la fuente de alimentación.

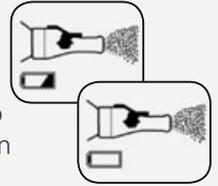


### El cable a la unidad de mando o nebulizador se ha desconectado

-> Asegúrese de que el cable está correctamente conectado.

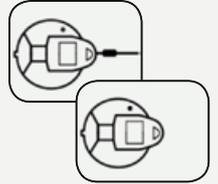

### No se ha introducido el fármaco

-> Introduzca el fármaco correspondiente.

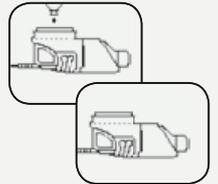

## Máximo nivel de higiene\*

- Puede desinfectarse en un esterilizador a vapor
- Puede desinfectarse en agua destilada hirviendo
- Puede esterilizarse en autoclave (hasta 121 °C)

\*Consulte las Instrucciones de uso

## Compacto, ligero y silencioso para máxima movilidad

- Puede utilizarse con pilas recargables o desechables
- Enchufable a la corriente con adaptadores para Europa, EE. UU. y UK
- Peso aprox. 300 g (incl. pilas)
- Funcionamiento silencioso y discreto
- Incluye dos nebulizadores completos para cambiar durante el viaje



**eFlow<sup>®</sup>rapid**  
nebuliser system  
N.º ref. 178G1005

Recambios **eFlow<sup>®</sup>rapid** con eBase Controller  
(unidad de mando azul)



**eFlow<sup>®</sup>rapid**  
**Nebulizador 2.0**  
(incl. generador de aerosol)  
N.º ref. 678G8222

**eFlow<sup>®</sup>rapid** Generador de aerosol 2.0  
N.º ref. 678B2620



Recambios **eFlow<sup>®</sup>rapid**  
(unidad de mando turquesa)



**eFlow<sup>®</sup>rapid**  
**Nebulizador**  
(incl. generador de aerosol)  
N.º ref. 178G8012

**Generador de aerosol eFlow<sup>®</sup>rapid**  
N.º ref. 178B2603



**PARI**  
Export Service  
Centre

**+49 (0) 8151 279-220**  
**Llámenos...**

También nos encontrará en:  
E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)  
[www.eflowrapid.info](http://www.eflowrapid.info)



**PARI Pharma GmbH**  
Moosstraße 3 · D-82319 Starnberg

**PARI Pharma**  
Advancing Aerosol Therapies

