

Especificaciones

Rendimiento

Alcance

Modelo	GII T-25T/T-30T				
Modo de trabajo	S/T, S, T, CPAP				
Cumplimiento	IPAP, EPAP, Frecuencia Respiratoria, Ti Control, Alerta, Monitoreo en tiempo real, etc.				
Rango de presión	IPAP: 4.0~25.0 hPa (T-25T), 4.0~30.0 hPa (T-30T), en incrementos 0.5 hPa EPAP: 4.0~25 hPa (T-25T/T-30T), en incrementos 0.5 hPa CPAP modo: 4.0~20.0 hPa Precisión de Presión \pm (0.8 hPa +4%)				
Nivel de humedad	Apagado / 1-5				
Alerta	Falla de Energía-Fuga Alta				
Peso	1.5kg sólo dispositivo 2.5kg con humidificador				
Dimensión	170x196x118mm 290x196x134mm con humidificador				
Energía	100-240 V; 50-60Hz				
Operación	5°C a 35°C (41°F a 95°F)				
Transporte/Almacenamiento	-25°C a 70°C (13°F a 158°F)				
Humedad	15% a 93% no-condensada				
Presión atmosférica	760 ~ 1060 hPa				
Corriente	100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,0A máx				
Presión de test(hPa)	4	9	15	20	25
Presión de conexión(hPa)	3	8	14	19	24
Flujo promedio de conexión(L/min)	93.2	97.6	98.1	98.5	99.1

BMC Medical Co., Ltd.

Room 901, Building 1, No.28 Pingguoyuan Road, Shijingshan, Beijing 100041, China
Tel: +86-10-5166 3880 Fax: +86-10-5166 3880 ext. 810 en.bmc-medical.com



T-25T/T-30T

El sistema GII T-25T/T-30T de BPAP es un dispositivo PAP de dos niveles (presión positiva de las vías respiratorias de dos niveles) para proporcionar ventilación No Invasiva a pacientes con Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) e Insuficiencia Respiratoria.



Operación Fácil



Pantalla LCD a color de 3.5 pulgadas

Visualización de onda de presión y de flujo en tiempo real.



Tecnología Eco Smart

Humidificación de alta eficiencia a través de un innovador diseño de dos cámara




Estable y Cómodo

- ◆ Nivel de ruido 28 dB, más silencioso
- ◆ Compensación automática de fugas y de altitud
- ◆ Reslex, función de liberación de presión de exhalación
- ◆ Detección de Apnea Central del Sueño(ACS)
- ◆ Automático Encendido / Apagado
- ◆ Aplicable tubo de 15 mm



Metodos de Revisar el Informe

- ◆ Informe rápido a través de la pantalla del dispositivo
- ◆ BMCares App (iCode / iCode QR / iCode QR+)
- ◆ RESmart nPAP Data Analysis Software (Tarjeta SD)
- ◆ iCode web (www.bmc-icode.com)
- ◆ RESmart Software web (www.icodeconnect.com/quick/info)

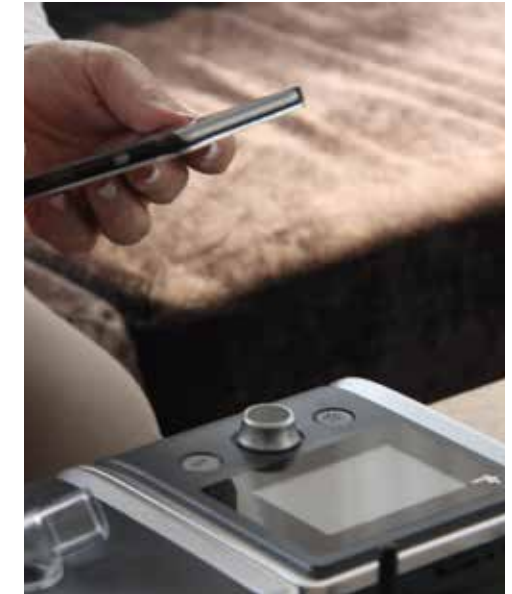

Accesorios Opcionales



◆ SpO₂ Kit



◆ Power Bank (D1402)



◆ DC/DC Converter



◆ GPRS / Wi-Fi Kit



◆ Heated Tubing



◆ Ventilator Disinfectant